

Link do produktu: <https://higienadent.com/alginian-chromatyczny-do-wyciskow-bms-dental-italgin-450g-p-1686.html>

WYŁĄCZNY
DYSTRYBUTOR



Alginian chromatyczny do wycisków Bms Dental Italgin 450g

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#000892
Producent	BMS Dental

Opis produktu

Bms Dental Italgin alginian chromatyczny do wycisków o wysokiej precyzji i wysokiej elastyczności. Dzięki wskaźnikowi fazy chromatycznej przygotowanie wycisku jest znacznie uproszczone.


Wskazania:

- modele badawcze,
- proteza stała i zdejmowana,
- wyciski tymczasowe


Sugestie:

- Podczas przygotowywania wycisku wlej do kubeczka najpierw wodę, a następnie proszek. Zmniejszy to pęcherzyki powietrza i poprawi jakość mieszanki.
- Spłukać wodą i zdezynfekować wycisk przed przechowywaniem.
- Przechowuj alginian w oryginalnym opakowaniu z zamkniętym klipsem.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym miejscu.

Dozowanie:

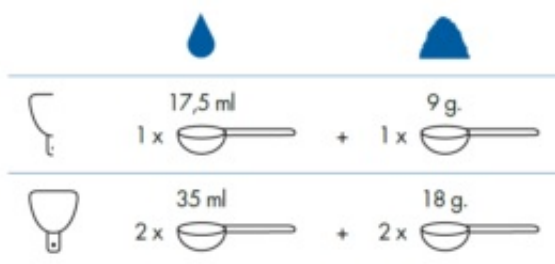

ITALGIN chromatic phases:
Phases chromatiques de ITALGIN :

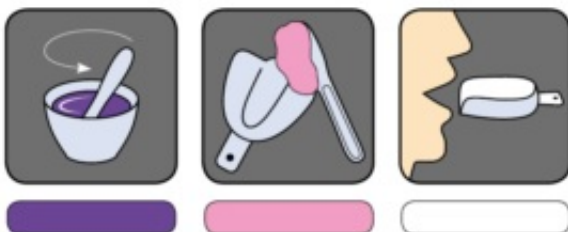

Czas mieszania 60s

Całkowity czas pracy łącznie z czasem mieszania 1:50

Czas w ustach 30s

Całkowity czas wiązania 3:20

Wyższa temperatura skraca czas pracy i wiązania, a niższa temperatura wydłuża czas pracy i wiązania.

Opakowanie: 450g