

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-chameleon-super-files-pilniki-maszynowe-6szt-p-3375.html>



Denco Chameleon Super Files pilniki maszynowe 6szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Super Files seria Chameleon pilniki maszynowe, narzędzia endodontyczne.


Charakteryzują się zaawansowaną technologią ceramiczno-metalową, zapewniającą doskonałą aktywację ciepłą i elastyczność. Dzięki zwiększonej o 168% twardości powierzchni i 3-10 razy większej odporności na ścieranie zapewniają wyjątkową wydajność cięcia, ochronę antykorozyjną i doskonałą biokompatybilność. Wyprodukowane ze stopu niklowo-tytanowego, z zastosowaniem nanomateriałów klasy medycznej, które są bezpieczniejsze i przyjazne dla środowiska.

Specyfikacja pilników:

- SX – narzędzie opcjonalne do tworzenia prostego dostępu i poszerzenia ujść kanałów,
- S1 – narzędzie kształtuje część koronową, docieramy nim na pełną długość roboczą ,
- S2 – narzędzie kształtuje część środkową, docieramy nim na pełną długość roboczą,
- F1,F2,F3,F4,F5 – narzędzie kształtuje część wierzchołkową.

Technika pracy narzędziami Chameleon:

- SX – ruch wymiatający, szczotkujący,
- S1- ruch wymiatający, szczotkujący,
- S2 – ruch wymiatający, szczotkujący,
- F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 – ruch pulsacyjny, pompujący.

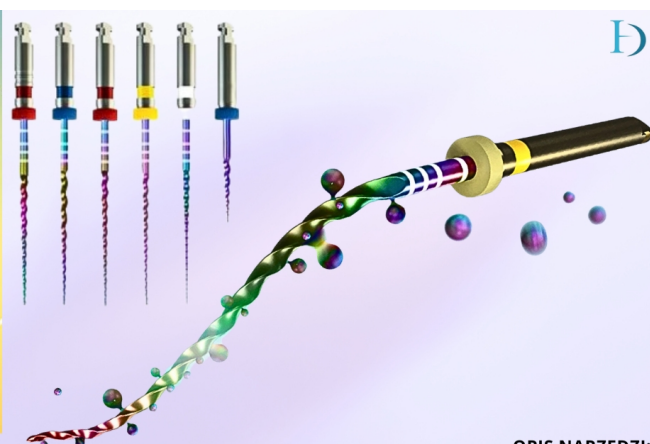

OPIS NARZĘDZI:

- SX** – NARZĘDZIE OPCJONALNE DO TWORZENIA PROSTEGO DOSTĘPU I POSZERZENIA UJŚĆ KANAŁÓW
- S1** – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ KORONOWĄ, DOCIERAMY NIM NA PEŁNĄ DŁUGOŚĆ ROBOCZĄ
- S2** – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ ŚRODKOWĄ, DOCIERAMY NIM NA PEŁNĄ DŁUGOŚĆ ROBOCZĄ
- F1, F2, F3, F4, F5** – NARZĘDZIE KSZTAŁTUJE CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWĄ

TECHNIKA PRACY NARZĘDZIAMI CHAMELEON:

- SX** – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY
- S1** – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY
- S2** – RUCH WYMIATAJĄCY, SZCZOTKUJĄCY
- F1, F2, F3, F4, F5** – RUCH PULSACYJNY, POMPUJĄCY

CE 0197

Długość: 19mm, 25mm.

Opakowanie: pilniki Super Files seria Chameleon, blister 6szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 19mm #SX, 25mm #F1, 25mm #F2, 25mm #F3, 25mm #F4, 25mm #F5, 25mm #S1, 25mm #S2, 25mm #SX-F3 (SX,S1,S2,F1,F2,F3)