

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-flexi-irrigation-needles-elastyczne-igly-do-irygacji-kanalow-20szt-p-3603.html>



Denco Flexi Irrigation Needles elastyczne igły do irygacji kanałów 20szt.

Cena	69,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000947
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Flexi Irrigation Needles to elastyczne, bezpieczne igły przeznaczone do efektywnej irygacji kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego.



Dzięki konstrukcji z tworzywa sztucznego (polipropylen), igły minimalizują ryzyko perforacji ścian kanału i pozwalają na bezpieczne podawanie płynu w głąb systemu kanałowego, również w przypadku zakrzywionych lub wąskich kanałów.



Cechy produktu:



- Materiał: elastyczny, nietraumatyzujący polipropylen,
- Długość robocza: 27 mm,
- Stożek: 04,
- Rozmiar: #30/ 30G/ 0,3mm,
- Końcówka boczna (side-vented) – zapewnia rozproszone uwalnianie płynu irygacyjnego bez nadciśnienia w wierzchołku,
- Końcówka zamknięta – ogranicza ryzyko przepchnięcia płynu poza otwór wierzchołkowy,
- Kompatybilność: standardowy łącznik Luer-Lock – pasuje do większości strzykawek stomatologicznych

Zalety:

- Elastyczna konstrukcja pozwala na łatwą penetrację nawet w zakrzywionych kanałach,
- Atraumatyczne zakończenie – bezpieczne dla struktur okołowierzchołkowych,
- Jednorazowego użytku,
- Precyzyjna irygacja i lepsza kontrola objętości płynu.

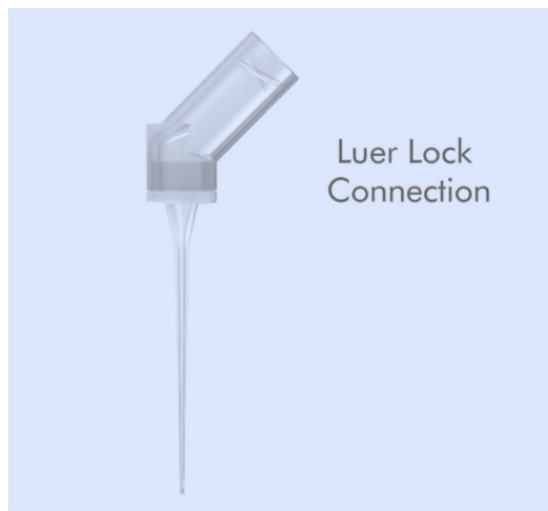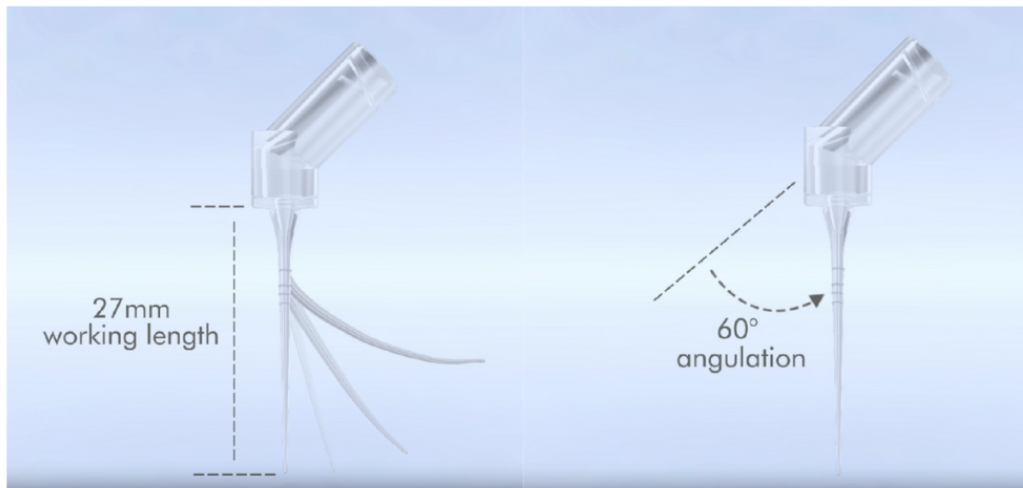

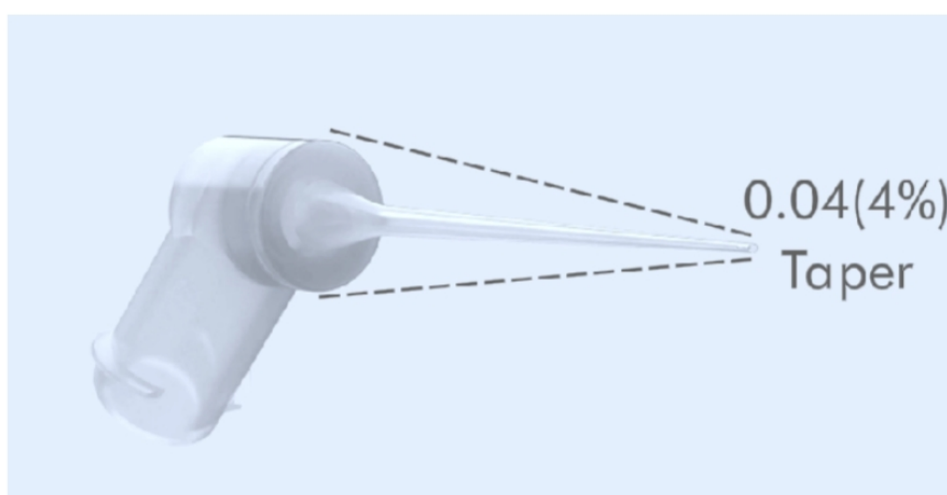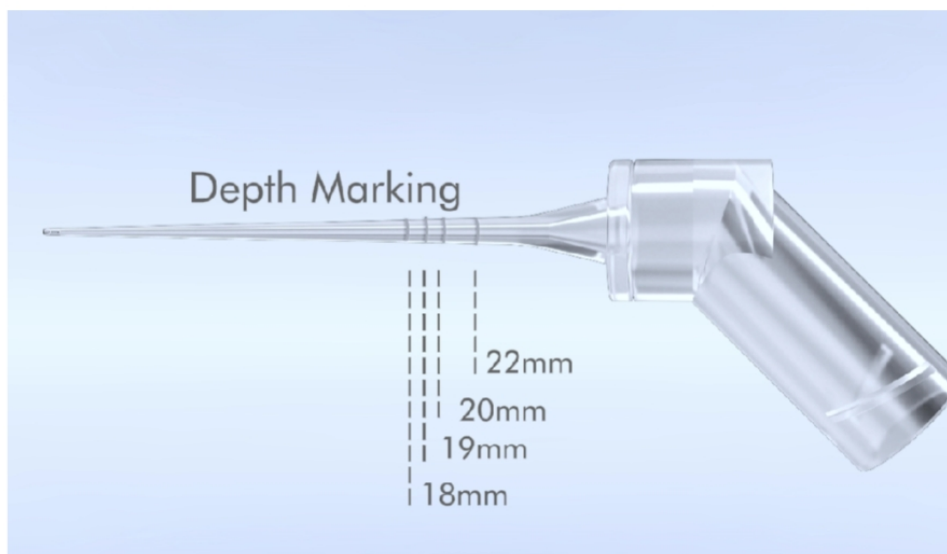

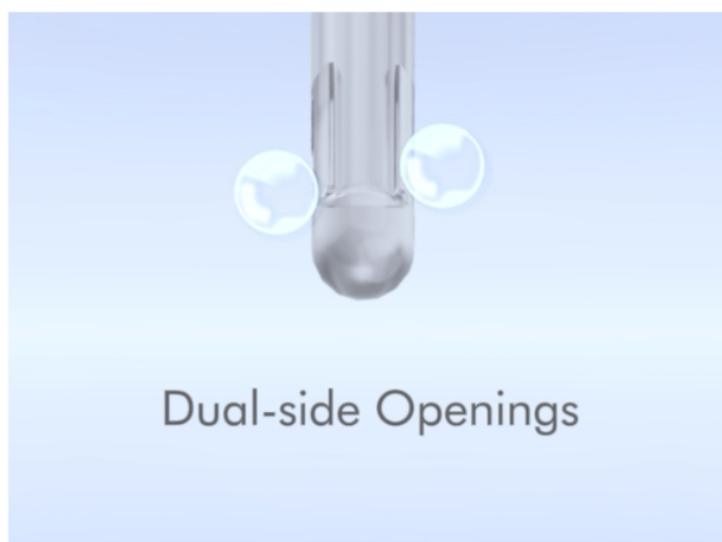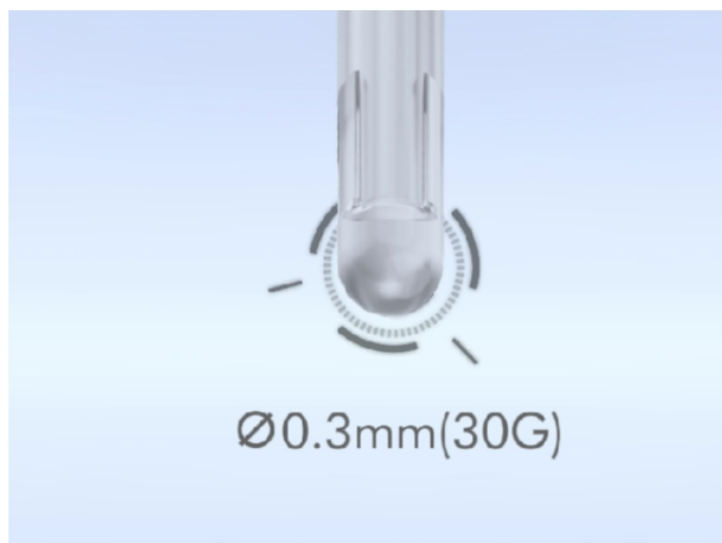

Zastosowanie:

- Płukanie kanałów korzeniowych środkami irygacyjnymi,
- Wspomaganie usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych,
- Zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z ekstruzją płynu poza otwór wierzchołkowy.

Opakowanie: Denco Flexi Irrigation Needles: igły do irygacji 20szt..

