

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-roll-wave-gold-niti-pilniki-endodontyczne-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-25mm-4szt-p-3605.html>



Denco Roll Wave Gold NiTi pilniki endodontyczne do opracowywania kanałów korzeniowych 25mm 4szt.

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000934
Producent	Denco

Opis produktu

Denco Roll Wave Gold to nowoczesne pilniki endodontyczne wykonane z niklowo-tytanowego stopu, poddanego specjalnej obróbce cieplnej Gold.

Zastosowanie technologii Gold Treatment zwiększa elastyczność narzędzi, minimalizując ryzyko złamania oraz umożliwiając skuteczne opracowanie nawet mocno zakrzywionych kanałów. Unikalna konstrukcja Roll Wave optymalizuje proces cięcia, zapewniając efektywne usuwanie zębiny i lepszą kontrolę nad instrumentacją.

Cechy produktu:

- materiał: stop NiTi z obróbką cieplną Gold – zwiększona elastyczność i wytrzymałość,
- konstrukcja ostrza: Roll Wave – spiralna geometria zapewniająca lepszą penetrację i usuwanie zębiny,
- rekomendowana prędkość pracy: 150–350 r/min.; F:30°, R:150°,
- dostępne rozmiary: small (20/07), primary (25/07), medium (35/06), large (45/05),
- kolor kodowania: zgodne z normą ISO dla łatwej identyfikacji rozmiaru.


Zastosowanie:

- instrumentacja kanałów korzeniowych prostych i zakrzywionych,
- opracowanie kanałów pierwotnych i wtórnych,
- skuteczne usuwanie zębiny oraz resztek organicznych i nieorganicznych.

Zalety:


- technologia Gold zwiększa odporność na cykliczne zmęczenie i pęknięcia,
- spiralna geometria Roll Wave poprawia efektywność cięcia i irygację,
- wysoka elastyczność pozwala na precyzyjną pracę w zakrzywionych kanałach,
- zredukowane ryzyko złamania narzędzia dzięki zoptymalizowanej stożkowatości.

ROLL WAVE GOLD NiTi

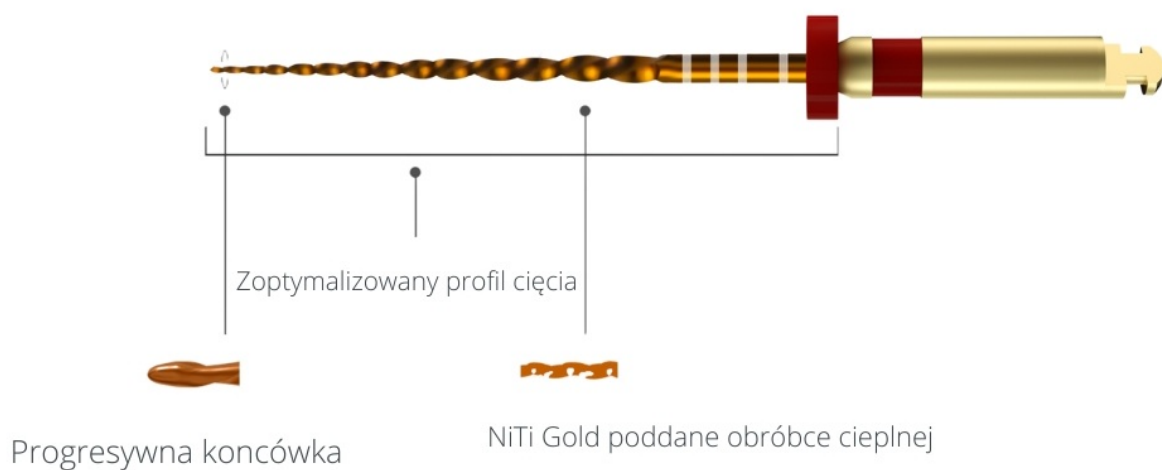

Dostępne w różnych rozmiarach,
dostosowane do różnych anatomii kanałów.

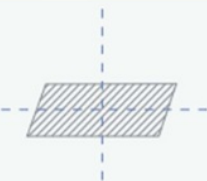

Długość (mm)	Rozmiar	Przekrój poprzeczny	Stożek (%)	Końcówka (mm)	Opakowanie
21/25/31	 20/07		7	0.20	4szt/blister w wybranym rozmiarze lub asortyment
	 25/07		7	0.22	
	 35/06		6	0.35	
	 45/05		5	0.45	

Opakowanie: Pilniki do endodoncji Denco Roll Wave Gold 25mm 4szt. w wybranym rozmiarze.

Niniejszy opis produktu podlega ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność intelektualną firmy HIGIENA-DENT z siedzibą w Sochaczewie. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25mm #20-45 ass