



## NARZĘDZIA ENDODONTYCZNE OFERTA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ DO LECZENIA KANAŁOWEGO

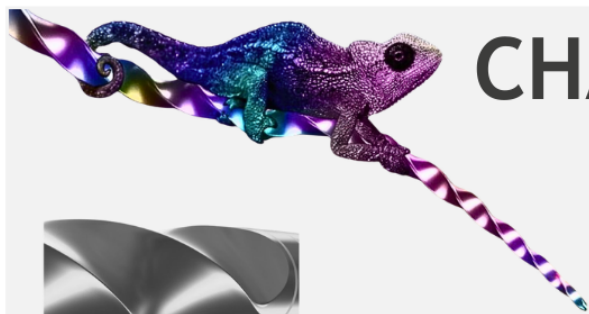

# CHAMELEON SUPER FILES

Długość: 19mm, 25mm  
Opakowanie: blister 6 szt.

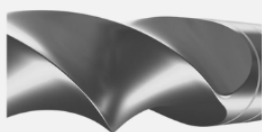


HARTOWANIE LASEROWE niezwykle perfekcyjne cięcie,  
zwiększona twardość powierzchni o 168%



AKTYWACJA CIEPLNA niklowo-tytanowa w połączeniu  
z hartowaniem laserowym i nanopowłoką zapewnia  
idealne połączenie wydajności cięcia i elastyczności



NANO-POWKŁOKA  
zwiększona odporność na ścieranie od 3 do 10 razy

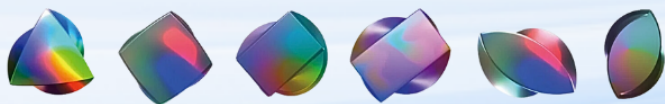

KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI POWIERZCHNIAMI



### SPECYFIKACJA:

- SX - narzędzie opcjonalne do tworzenia prostego dostępu i poszerzenia ujść kanałów
- S1 - narzędzie kształtuje część koronową, docieramy nim na pełną długość roboczą
- S2 - narzędzie kształtuje część środkową, docieramy nim na pełną długość roboczą
- F1, F2, F3, F4, F5 - narzędzie kształtuje część wierzchołkową

### TECHNIKA PRACY narzędziami CHAMELEON:

- SX - ruch wymiatający, szczotkujący
- S1 - ruch wymiatający, szczotkujący
- S2 - ruch wymiatający, szczotkujący
- F1, F2, F3, F4, F5 - ruch pulsacyjny, pompujący

Doskonale cięcie  
Antykorozyjne  
Biokompatybilne  
Wytrzymałość + odporność



PILNIKI  
MASZYNOWE

01


# D-FILES

DO REENDO. PILNIKI DO USUWANIA GUTAPERKI I WYPEŁNIEŃ Z KANAŁU KORZENIOWEGO

Długość: 16mm, 18mm, 22mm

Opakowanie: blister 6 szt.

Do zastosowania w przypadku konieczności ponownego leczenia kanału korzeniowego po niepowodzeniu leczenia. Wykonane ze specjalnego stopu NiTi o dobrej wytrzymałości i elastyczności. Zalecana prędkość wynosi 150-300 obr./min, moment obrotowy 2,5 N.cm

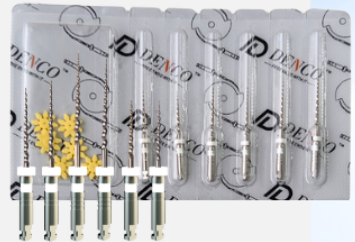

# PA-FILES GOLD

PILNIKI DO OPRACOWNIA ŚCIEŻKI KANAŁU

Długość: 25mm

Opakowanie: blister 6 szt.

Do budowy ścieżki ślizgowej - do opracowania drogi wprowadzania narzędzi. Kwadratowy przekrój, stożek 2%. Wykonane ze stopu niklowo tytanowego NiTi. Elastyczne i odporne na zużycie.



# PEESO REAMERS

POSZERZACZE KANAŁOWE

Długość: 28mm, 32mm

Opakowanie: 6 szt.

Do opracowywania kanałów korzeniowych. Wysoka jakość medycznej stali nierdzewnej. Doskonała jakość cięcia. Brak plastikowych elementów. Zalecana prędkość obrotowa 800-1200 obr./min. Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.



# GATES DRILLS

WIERTŁA DO UDRAŻNIANIA KANAŁÓW

Długość: 28mm, 32mm

Opakowanie: 6 szt.

Do opracowywania kanałów korzeniowych. Wysoka jakość medycznej stali nierdzewnej. Doskonała jakość cięcia. Zalecana prędkość obrotowa 800-1200 obr./min. Łatwa identyfikacja dzięki liczbie rowków na trzonku.



# PASTE CARRIER

IGŁY LENTULO ZE SPRĘŻYNKĄ

Długość: 25mm

Opakowanie: 4 szt.

Wypełniacze spiralne. Regularnie rozmieszczone spirale do równomiernego rozprowadzania materiału. Wykonane z wysokiej jakości medycznej stali nierdzewnej. Kolorystyczne kody dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.



# U-FILES

DO PŁUKANIA I OCZYSZCZANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Długość: 33mm

Opakowanie: 6 szt.

Produkt dostępny w dwóch wersjach:

- NiTi (wykonane ze stopu niklowo-tytanowego)
- SS (stal nierdzewna)





## C+ FILES

WYTRZYMAŁE PILNIKI  
DO WYMAGAJĄCYCH KANAŁÓW

Stworzone z myślą o pracy w trudnych i wąskich kanałach korzeniowych. Wzmocniona struktura, trójkątny przekrój. Pilniki posiadają ograniczniki.

Długość: 25mm  
Opakowanie: 6 szt.



## MIAZGOCIĄGI

DO USUWANIA MIAZGI  
Z KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Precyzyjna konstrukcja - cienkie, ostre wypustki zapewniają skuteczne usuwanie miazgi bez uszkodzenia ścian kanału.

Długość: 25mm  
Opakowanie: 10 szt.



## H-FILES K-FILES

DO OPRACOWYWANIA  
KANAŁÓW KORZENIOWYCH

Efektywne, agresywne, wydajne. Wysoka siła cięcia. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Długość: 25mm, 31mm  
Opakowanie: 6 szt.



## REAMERS

POSZERZACZE KANAŁOWE

Wysokiej jakości medyczna stal nierdzewna. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Długość: 25mm, 31mm  
Opakowanie: 6 szt.



## SPREADERS

ROZPYCHACZE DO GUTAPERKI

Do pionowej i bocznej kondensacji gutaperki. Zakończone wydłużonym stożkiem ze ściętym końcem. Zamocowana na stałe podkładka i uchwyt.

Długość: 25mm  
Opakowanie: 6 szt.



# ENDO EXTRACTOR SYSTEM

## E-MATE ES

ZESTAW DO USUWANIA ZŁAMANYCH INSTRUMENTÓW ENDODONTYCZNYCH  
Z KANAŁU KORZENIOWEGO



Zaawansowane urządzenie stworzone z myślą o stomatologach zajmujących się leczeniem endodontycznym, szczególnie w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba usunięcia złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych. Zapewnia pełną kontrolę nad procesem ekstrakcji, minimalizując ryzyko uszkodzenia struktury zęba lub dalszego pogłębienia uszkodzeń tkanek. Łatwa obsługa - kąt E-MATE ES można wstępnie wygiąć w zależności od położenia zęba, jest regulowany w zakresie od 45° do 90°. Przewidywalny wynik, wygodniejszy zabieg.

Zestaw Endo Extractor System E-MATE ES zawiera: 1x uchwyt ekstraktora, 3x ekstraktor, 5x pilnik, 3x reamery, 3x wiertła trepanacyjne, 1x klucz.



### MIARKA DO GUTAPERKI

Linijka kalibracyjna i otwór pomiarowy. Wyraźne i precyzyjne linie, łatwa w użyciu. Lekka, poręczna.



### PUDEŁKO NA PILNIKI

Pudełko wielofunkcyjne na pilniki. Wbudowana linijka do pomiaru długości pilników oraz do ich przechowywania.



### LINIJKĄ

Precyzyjny pomiar długości roboczej narzędzi kanałowych, gutaperki, sączka. Mała, lekka, ergonomiczna, możliwość regulacji średnicy pierścienia. Podziałka co 1mm.



**HIGIENA-DENT**

Hurtownia stomatologiczno - medyczna

**HIGIENA-DENT SP. Z O.O.**  
Hurtownia stomatologiczno-medyczna  
Czerwonka-Parcel 45/0  
96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie  
Telefon: +48 721 529 086, +48 605 490 183  
E-mail: [sklep@higienadent.com](mailto:sklep@higienadent.com)  
[www.higienadent.com](http://www.higienadent.com)