

Link do produktu: <https://higienadent.com/kulzer-bulk-flow-one-value-pack-10-x-2g-plynnny-kompozyt-p-2504.html>



Kulzer Bulk Flow One Value Pack 10 x 2g - płynny kompozyt

Cena	920,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	#66095336
Producent	Kulzer

Opis produktu

Charisma Bulk Flow One kompozyt typu bulk-fill o płynnej konsystencji, adresowany do wypełnień ubytków w zębach bocznych.

Charisma Bulk Flow One przeznaczony jest do użycia w technice jedno- i dwuwarstwowej, do odbudowy ubytków w zębach mlecznych, jako materiał podkładowy.

Właściwości:


- nie wymaga użycia wierzchniej warstwy kompozytu w paście
- krótszy czas pracy, brak konieczności warstwowej odbudowy, wykonanie odbudowy przy użyciu wyłącznie jednej strzykawki
- możliwość aplikacji materiału o grubości do 4 mm
- samopoziomujący - idealne dopasowanie do opracowanych ścianek ubytku
- konsystencja flow
- ONE (Adaptive light matching) - zawsze właściwy kolor wypełnienia, Charisma Bulk Flow One doskonale dopasowuje się do koloru tkanki zęba od koloru A1 do D4
- krótszy czas zabiegu: czas polimeryzacji: 20 sec. = większy komfort dla pacjenta
- wysoka tiksotropia zapewnia stabilność materiału podczas aplikacji oraz większy komfort pracy lekarza (szczególnie w szczęcie)
- dobry kontrast na zdjęciach RTG - bezpieczna i pewna diagnostyka
- Charisma Bulk Flow One zapewnia doskonałe właściwości fizyko-chemiczne co gwarantuje trwałe uzupełnienia, odporne na działanie sił żucia

MOŻLIWE TECHNIKI PRACY

TECHNIKA DWUWARSTWOWA



TECHNIKA JEDNOWARSTWOWA

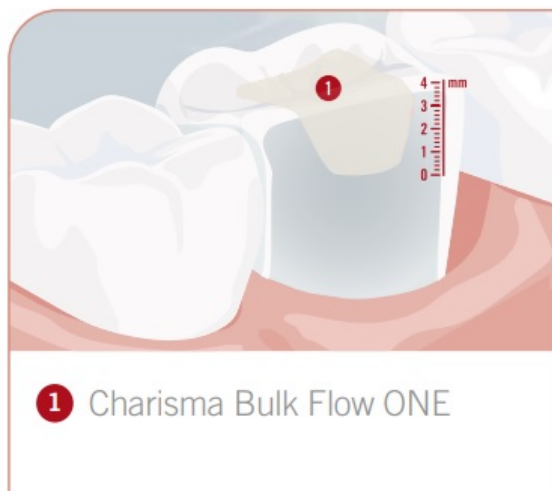

Kulzer Bulk Flow One Value Pack.

Zawartość opakowania: 10 x strzykawka 2 g, 10 x 5 kaniula, 1 x instrukcja obrazkowa, 1 x instrukcja użytkowania.